


フレキシブルダイヤモンドディスク

ポリダイヤ & オーロラポリダイヤ

しなる
なじむ
けずる

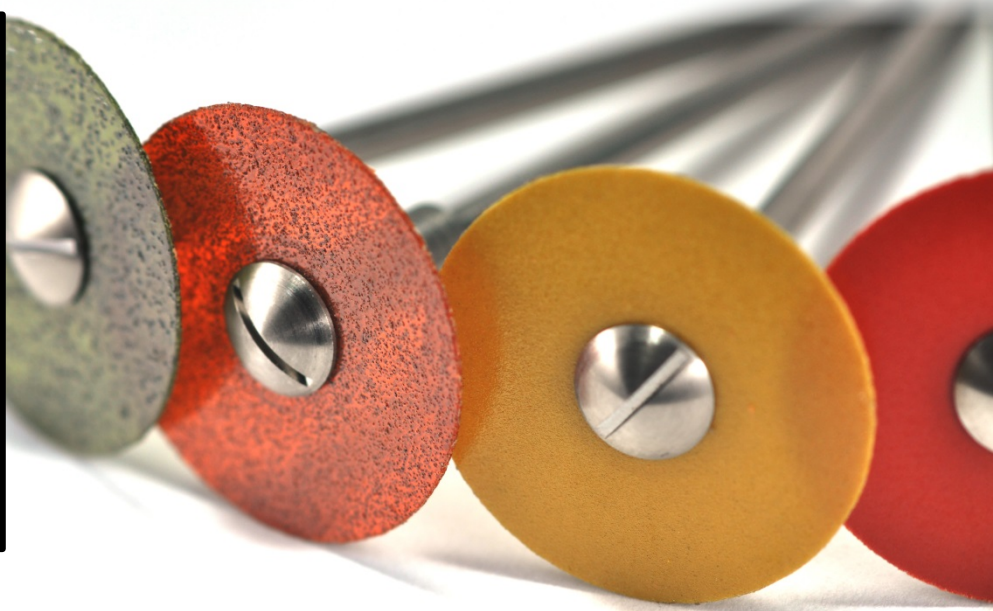

ポリイミド樹脂にダイヤモンド砥粒を強固に一体化したダイヤモンドディスクです。



対象材料：ジルコニア、二ケイ酸リチウム、陶材、硬質レジン

ブリッジの隣接面、切端部、歯頸部をポリダイヤのしなりを利用して、削って広げたり、柔らかくなじませることができます。


特に下顎前歯など狭い隙間において削りから磨きまで行えます。

また、両面にダイヤモンド砥粒があるので、好みに合わせて

押し削り/引き削りで使用できます。

※カッティングはできません。

ポリダイヤ (φ19mm)

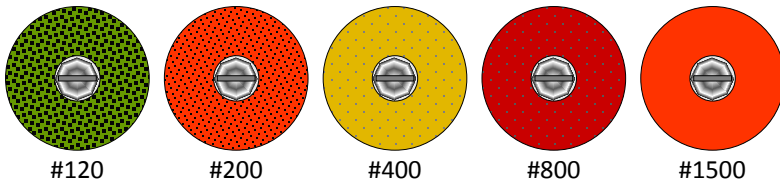

#120


#200

#400

#800

#1500

オーロラポリダイヤ (φ13mm)

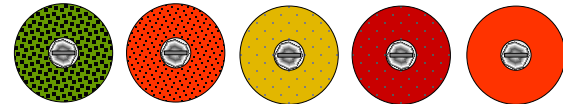

#120

#200

#400

#800

#1500

オーロラポリダイヤ専用マンドレルの頭部の厚みは0.4mmと非常に薄く、作業の邪魔をしません。

歯科工用ダイヤモンド研削材

ポリダイヤ

形態：2種

(ポリダイヤ = 大, オーロラポリダイヤ = 小)

包装・価格(税別)：

ポリダイヤ

- 1本入り = 3000円
- 3本入り = 9000円
- アソート3本入 = 9000円
(#120, #400, #800 各1本)

オーロラポリダイヤ

- 3本入り = 4000円
- アソート3本入 = 4000円
(#120, #400, #800 各1本)

一般医療機器 28B3X10005000012

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2017年5月現在の物です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町 7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp